


CE
0473

PORTEX™

smiths medical

Voodiärise hoidik

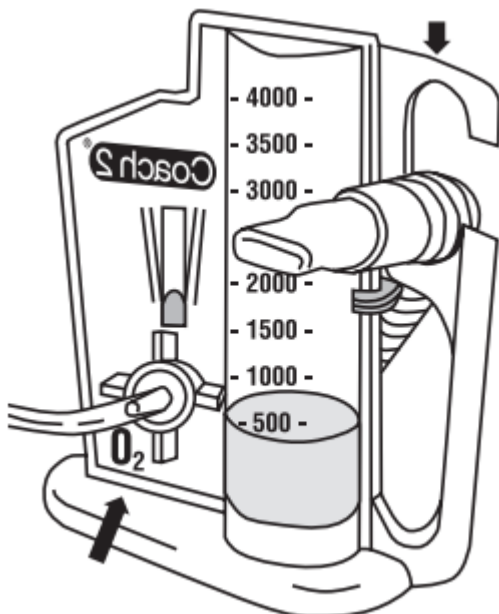

O₂ ühendus

Coach2® Stimuleeriv Spiromeeter

Patsiendi nimi
Toa number
Kehtiv maht
Määratud maht
Kordamine
Kordi päevas

Need juhised sisaldavad olulist teavet toote ohutuks kasutamiseks. Enne selle toote kasutamist lugege läbi kõik käesoleva kasutusjuhendi sisu, sealhulgas hoiatused ja ettevaatusabinõud. Hoiatuste, ettevaatusabinõude ja juhiste mitte nõuetekohane järgimine võib põhjustada patsiendi surma või tõsiseid vigastusi. See on tervishoiutöötaja vastutus tagada, et hooldustöötajad mõistaksid hooldustööde tegemise ja hooldamise juhiseid.

1. KIRJELDUS:

Coach2® stimuleeriv spiromeeter on mittesteriilne ja ühel patsiendil kasutatav hingamisteede teraapia seade. Seadmes on port, mis võimaldab täiendavat hapnikuvarustust. Patsiendid peavad järgima arsti poolt kindlaks määratud stimuleeriva spiromeetri ravi juhised.

2. NÄIDUSTUS:

Coach2® stimuleeriv spiromeeter on mõeldud stimuleeriva spiromeetria jaoks. Seade aitab patsientidel taastuda operatsioonist ja / või eeldab sügavaid hingamisharjutusi, et teostada ja mõõta aeglaseid sügavaid sissehingamisi, et parandada sekretsiooni likvideerimist, aidata atelkeasi ravis ja / või hõlbustada hingamisteede avamist.

Coach2® stimuleeriv spiromeeter on mõeldud kasutamiseks haiglas ja / või kodus.

3. VASTUNÄIDUSTUSED:

Selle seadme kohta pole teadaolevaid vastunäidustusi.

4. HOIATUSED:

4.1. Optimaalse toimimise tagamiseks ei tohiks seadet kallutada kasutamise ajal. Asetage seade pinnale ja nii lähedal kui võimalik silmade tasemel.

4.2. Kui põhiseadet on vaja kasutamise ajal stabiliseerida, tuleks seda teha ainult käepideme abil.

5. KASUTUSJUHEND:

5.1. Ühendage toru avatud ots pordiga ja pikendage seda (vt. joonis 1).

5.2. Lükake patsiendi kollane eesmärgi indikaator vastavalt teie arsti poolt määratud mahule (ml). (vt joonis 2).

5.3. Huuled huulikul, hingake täielikult välja. Seejärel sulgege oma huuled tihedalt huuliku ümber. (vt joonis 3).

5.4. Hingake aeglaselt ja sügavalt sisse, hoides väikest, kollast „Inspiratory Coach“ nii lähedal õnnelikule näole kui võimalik. (vt joonis 4).


5.5. Hingake sisse nii sügavalt kui võimalik. Kui te ei saa enam sisse hingata, hoidke hinge kinni 6 sekundit * ja märkige kõrgeim tase, milleni kollase kolvi ülaosa ulatub. Püüa saavutada ettenähtud eesmärki. (vt joonis 5).

5.6. Korrake nii mitu korda, kui ette nähtud.


5.7. Täiendav hapniku kasutus:

Täiendavat hapniku vajavatel patsientidel asub port sissehingamis toru ühendusest teisel pool. Porti saab ühendada tavalise hapnikutoru ja stimuleeriva harjutuse ajal saab täiendavat hapnikku. Sissehingatava hapniku kontsentratsioon väheneb, kui patsient hingab kiiremini. (vt joonis 6).


Joonis 1

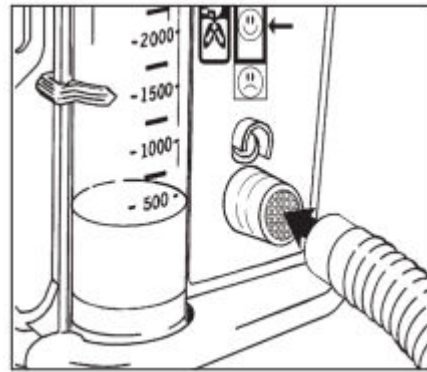


Joonis 2

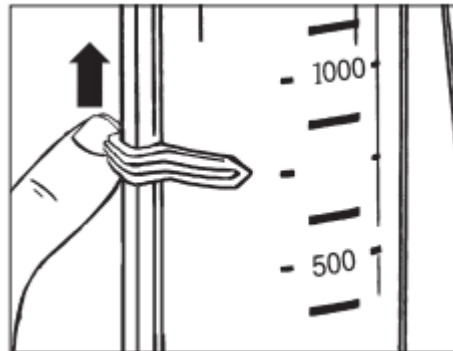


Joonis 3

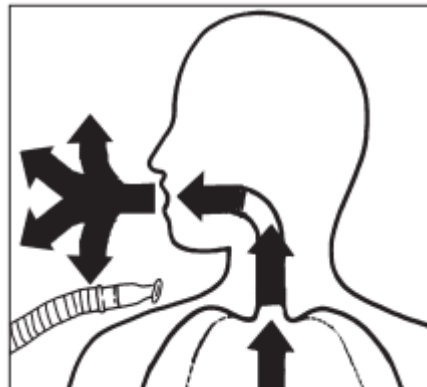


Joonis 4

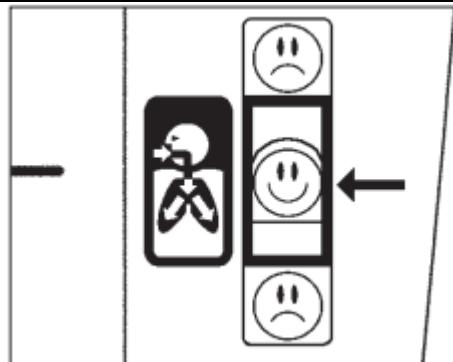

Joonis 5

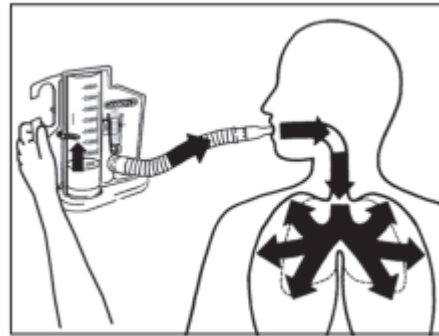

Sissehingatav hapnik vs O₂ voolukiirus

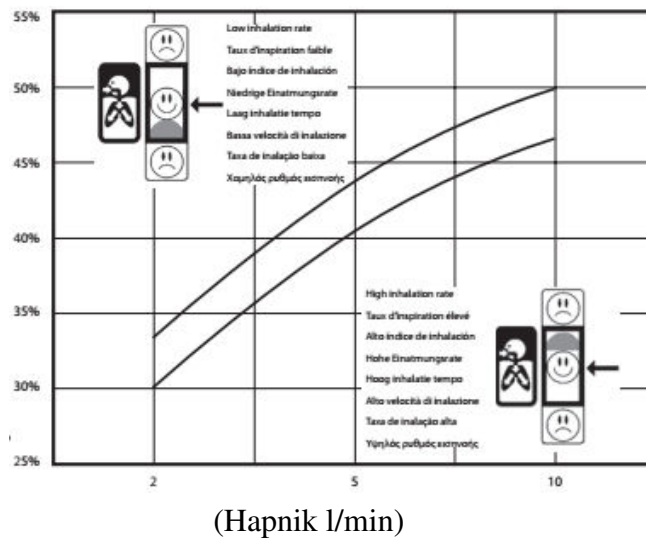

Joonis 6

Sissehingatud hapnik



Tähelepanu vt kasutusjuhendit. Lateksivaba. Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud.

Mittesteriilne. Partiinumber. Tootmiskuupäev. Kogus. Katalooginumber.

Ettevaatust: USA seaduse kohaselt võib seda seadet müüa või tellida arsti tellimuse alusel.

Ühe patsiendi põhiseks kasutamiseks.

Tootekood:

22-4000 Coach 2 4000ml

22-2000 Coach 2 2000ml (lastele)

Progressi kaart

Maht	1	2	3	4	5
4000 ml					
3750 ml					
3500 ml					
3250 ml					
3000 ml					
2750 ml					
2500 ml					
2250 ml					
2000 ml					
1750 ml					
1500 ml					
1250 ml					
1000 ml					
Kokku					


Smiths Medical ja Portexi disainimärgid ja Coach2 on Smiths Medical grupi kaubamärgid. Sümbol ® näitab, et kaubamärk on registreeritud USA patentides ja kaubamärkides ka teistes riikides.

Kirjeldatud tooted on hõlmatud ühe või mitme järgmise USA patendiga nr.

USA 5 984 873 ja 403 769 USA dollarit; muud patent (id) ootel.

© 2007 Smiths Medical grupp. Kõik õigused kaitstud

 **Smiths Medical ASD, Inc.**
Rockland, MA 02370, USA

 **Smiths Medical International Ltd.**
Hythe, Kent, CT21 6JL, UK

Australian Representative
Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.
Brisbane, QLD 4113, Australia

www.smiths-medical.com

MEHED	147cm	152cm	158cm	163cm	168cm	173cm	178cm	183cm	188cm	193cm	198cm
Vanus											
20	**2350	2550	2700	2900	3050	3250	3400	3550	3750	3900	4100
25	2300	2500	2650	2850	3000	3200	3350	3550	3700	3900	4050
30	2300	2450	2600	2800	2950	3150	3300	3500	3650	3850	4000
35	2250	2400	2600	2750	2950	3100	3300	3450	3650	3800	4000
40	2200	2350	2550	2700	2900	3050	3250	3400	3600	3750	3950
45	2150	2350	2500	2700	2850	3050	3200	3350	3550	3700	3900
50	2100	2300	2450	2650	2800	3000	3150	3350	3500	3700	3850
55	2100	2250	2400	2600	2750	2950	3100	3300	3450	3650	3800
60	2050	2200	2400	2550	2750	2900	3100	3250	3450	3600	3800
65	200	2150	2350	2500	2700	2850	3050	3200	3400	3550	3750
70	1950	2150	2300	2500	2650	2850	3000	3150	3350	3500	3700
75	1900	2100	2250	2450	2600	2800	2950	3150	3300	3500	3650
80	1900	2050	2200	2400	2550	2750	2900	3100	3250	3450	3600

NAISED	147cm	152cm	158cm	163cm	168cm	173cm	178cm	183cm	188cm
Vanus									
20	2250	2400	2550	2750	2900	3050	3200	3350	3500
25	2200	2350	2500	2650	2800	2950	3100	3250	3400
30	2100	2250	2400	2600	2750	2900	3050	3200	3350
35	2050	2200	2350	2500	2650	2800	2950	3100	3250
40	1950	2100	2250	2450	2600	2750	2900	3050	3200
45	1900	2050	2200	2350	2500	2650	2800	3000	3100
50	1800	1950	2100	2300	2450	2600	2750	2900	305
55	1750	1900	2050	2200	2350	2500	2650	2800	2950
60	1650	1820	1950	2150	2300	2450	2600	2750	2900
65	1600	1750	1900	2050	2200	2350	2500	2650	2800
70	1500	1650	1800	2000	2150	2300	2450	2600	2750
75	1450	1600	1750	1950	2050	2200	2350	2500	2650
80	1350	1500	1650	1850	2000	2150	2300	2450	2600